



Instructie i-STAT1 voor thuisgebruik




UMC Utrecht

umcutrecht.nl


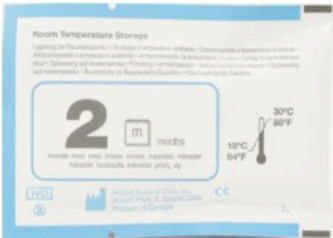
Algemeen

Uw arts heeft namens u een aanvraag gedaan voor het in bruikleen geven van een i-STAT1 thuismeter. Hierdoor hoeft u niet elke keer voor een bloedafname naar het ziekenhuis. U heeft voor het gebruik van de i-STAT1 een training gekregen van het POC-team van het UMC Utrecht. Onderstaande instructie kan u hierin ondersteunen.


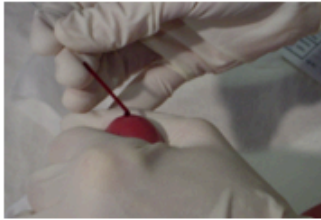




Benodigheden

	<ul style="list-style-type: none">• i-STAT1• Cartridge• Prikker• Capillair
---	---







Belangrijke informatie cartridges







	<ul style="list-style-type: none">• Lotnummer: gebruik alleen de cartridges die zijn gecontroleerd door het POC-team van het UMC Utrecht.• Houdbaarheidsdatum: verlopen cartridges zullen door de i-STAT1 niet geaccepteerd worden.• In de koelkast (5-8 °C) te gebruiken tot de houdbaarheidsdatum.• Eenmaal uit de koelkast niet meer in de koelkast terug plaatsen.
	<ul style="list-style-type: none">• Cartridge uit de koelkast; 5 minuten op kamertemperatuur laten komen (18-20 °C) voordat deze gebruikt kan worden.• Eenmaal uit de koelkast is deze (onaangebroken) cartridge 2 maanden houdbaar op kamertemperatuur.• Schrijf op de verpakking de houdbaarheidsdatum (+2 maanden) als u deze cartridge niet direct gebruikt.

Instructie Capillaire afname & vullen van de cartridge

	<ul style="list-style-type: none">• Maak de punctieplaats schoon met water en zeep en droog na.• Verwijder het topje van de prikker.• Plaats de lancet op de vinger en zet de punctie.• Veeg de eerste druppel weg.	
	<ul style="list-style-type: none">• Zet het capillair tegen de bloeddruppel en vul geleidelijk het capillair.• Let erop dat er geen luchtballen ontstaan in de capillair.• Vul het capillair tot minstens ¾.	
	<ul style="list-style-type: none">• Steek het capillair in de monsterinlaat.	
	<ul style="list-style-type: none">• Vul de cartridge tot het uiteinde van de blauwe driehoek.• Let erop dat er geen luchtbel in de cartridge te zien is, vul anders een nieuwe cartridge.• Overtollige bloeddruppel in de monsterinlaat kan weg gedept worden met een gaasje.• Let erop dat hierbij geen bloed uit de cartridge gezogen wordt.	
		<ul style="list-style-type: none">• Sluit de cartridge af met de sluiting totdat u een klik hoort.

Het instellen van de i-STAT1

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 
<p>Zet de i-STAT1 aan (zie groene stip)</p>	<p>Selecteer 2: i-STAT1 cartridge</p>
<p>3.</p> 	<p>4.</p> 
<p>"Scan of enter ID operateur" Druk op enter</p>	<p>"Scan of enter ID patiënt" Druk op enter</p>
<p>5.</p> 	<p>6.</p> 
<p>Barcode op de cartridge verpakking</p>	<p>"Scannen cartridge partijnummer"</p>

<p>7.</p> 	<p>8.</p> 
<p>Zodra deze melding verschijnt heeft u 15 minuten de tijd om de cartridge te vullen.</p>	<p>Plaats de cartridge (direct na het vullen) in de i-STAT1</p>
<p>9.</p> 	<p>10.</p> 
<p>"Cartridge wordt geïdentificeerd"</p>	<p>"Kalibratie van de cartridge"</p>
<p>11.</p> 	<p>12.</p> 
<p>"Analyseren van het monster"</p>	<p>"Resultaat - Pagina 1"</p>

<p style="text-align: center;">13.</p> 	<p style="text-align: center;">14.</p> 
<p style="text-align: center;">Druk om naar volgende pagina te gaan</p>	<p style="text-align: center;">"Resultaat – Pagina 2"</p>

Onderhoud

Verontreiniging

Dagelijks of na elk gebruik de buitenzijde afnemen met een vochtig doekje met alcohol 70% en bij zichtbare verontreiniging eerst huishoudelijk reinigen.

Software-update

Eens per half jaar krijgt u een uitnodiging voor de software update van uw i-STAT1. Maak van tevoren een afspraak met het POC-team. U kunt wachten tot de update uitgevoerd is.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de i-STAT1 en/of de afname? Wij helpen u graag! U kunt dan contact opnemen met het Point of Care-team van het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het UMC Utrecht via telefoonnummer 088 75 739 08 (of 088 75 588 26 buiten kantoor tijden).

Suggesties, klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening en/of de bejegening door medewerkers of iets anders. Dit horen wij graag van u zodat wij uw ervaring kunnen gebruiken om onze zorg te verbeteren.

Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dit via de website van het UMC Utrecht (www.umcutrecht.nl) door te zoeken op "Klachtenformulier voor patiënten".

Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

088 75 555 55
info@umcutrecht.nl

umcutrecht.nl



UMC Utrecht